

便携式水质测量仪

MultiLine®

智能化

数字化

数字传感器

多参数测试仪的一次
技术革命

多参数测试

智能化

数字化

新款：FD0925荧光法溶氧传感器

仪器型号	pH 3110	pH 3210 (停产)	pH 3310
pH	-2.0 ... 19.9 ± 0.1 pH -2.00 ... 19.99 ± 0.01 pH -2.000 ... 19.999 ± 0.005 pH	-2.0 ... 19.9 ± 0.1 pH -2.00 ... 19.99 ± 0.01 pH -2.000 ... 19.999 ± 0.005 pH	-2.0 ... 19.9 ± 0.1 pH -2.00 ... 19.99 ± 0.01 pH -2.000 ... 19.999 ± 0.005 pH
mV	± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2000 ± 1 mV	± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV	± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV
温度	-5.0 ... 105.0 °C ± 0.1 °C	-5.0 ... 105.0 °C ± 0.1 °C	-5.0 ... 105.0 °C ± 0.1 °C
自动读数	自动	自动/手动选择	自动/手动选择
CMC	无	有	有
校正	1, 2或3点: WTW和DIN标准液	1, 2, 3或5点: WTW、DIN/NIST标准液和16种标准液设定	1, 2, 3或5点: WTW、DIN/NIST标准液和16种标准液设定
校正记录	记录最后一次校正	记录最后一次校正	记录最后5次校正
显示	7段LCD显示	7段LCD图形显示, 有背光	7段LCD图形显示, 有背光
数据存贮	---	手动200组	手动200组, 自动5000组
数据记录方式	---	手动	手动/时间驱动
界面	---	---	USB界面
电源	4×1.5V碱性电池.或4个1.2V充电电池	4×1.5V碱性电池.或4个1.2V充电电池	4×1.5V碱性电池.或4个1.2V充电电池
连续操作时间	高到2500小时	高达1000小时 (背光时150小时)	高达1000小时 (背光时150小时)


仪器型号	Oxi 3205/Oxi 3210	Oxi 3310
D.O.浓度*	0.00 ... 19.99 mg/l ± 0.5% 测试值 0 ... 90 mg/L ± 0.5% 测试值	0.00 ... 19.99 mg/l ± 0.5% 测试值 0 ... 90 mg/L ± 0.5% 测试值
饱和度*	0.0 ... 199.9% ± 0.5% 测试值 0 ... 600% ± 0.5 测试值	0.0 ... 199.9% ± 0.5% 测试值 0 ... 600% ± 0.5 测试值
分压*	0 ... 199.9hPa, 0 ... 1250hPa ± 0.5%	0 ... 199.9hPa, 0 ... 1250hPa ± 0.5%
温度	-5.0 ... 105.0 °C ± 0.1 °C	-5.0 ... 105.0 °C ± 0.1 °C
自动读数	自动/手动选择 (仅3210)	自动/手动选择
校正	CellOx/DurOx探头, OxiCal校正套	CellOx/DurOx探头, OxiCal校正套
校正记录	记录最后一次校正	记录最后5次校正
压力补偿	自动补偿, 500...1100 mbar	自动补偿, 500...1100 mbar
显示	7段LCD图表显示, 有背光	7段LCD图表显示, 有背光
数据存贮	Oxi 3205:无, Oxi 3210:手动 200	手动200/自动5000
数据记录方式	Oxi 3205:无, Oxi 3210:手动 200	手动/时间驱动
界面	---	USB界面
电源	4×1.5V碱性电池.或4个1.2V充电电池	4×1.5V碱性电池.或4个1.2V充电电池
连续操作时间	高达1000小时 (背光时150小时)	高达1000小时 (背光时150小时)

*取决于传感器

仪器型号	Cond 3110	Cond 3210 (停产)	Cond 3310
电导率	0,0 ... 1000 mS/cm ± 0,5 % v. Mw.	0.0...1000 mS/cm ± 0,5 %	0.0 ... 1000 mS/cm ± 0,5 %
低电导率		0.000 ... 1.999 µS/cm, K = 0.01 cm ⁻¹ 0.00 ... 19.99 µS/cm, K = 0.1 cm ⁻¹	0.000 ... 1.999 µS/cm, K = 0.01 cm ⁻¹ 0.00 ... 19.99 µS/cm, K = 0.1 cm ⁻¹
电阻率	—	0,00 ... 20 MΩ cm	0,00 ... 20 MΩ cm
电极常数	固定: 0.475 cm ⁻¹ , 0.880 cm ⁻¹ 校正允许值: 0.450 ... 0.500 cm ⁻¹ 0.800 ... 0,880 cm ⁻¹	固定: 0.01 cm ⁻¹ 校正允许值: 0.450 ... 0.500 cm ⁻¹ 0.800 ... 0,880 cm ⁻¹ 可调整值: 0.090 ... 0.110 cm ⁻¹ 0.250 ... 25.000 cm ⁻¹	固定: 0.01 cm ⁻¹ 校正允许值: 0.450 ... 0.500 cm ⁻¹ 0.800 ... 0,880 cm ⁻¹ 可调整值: 0.090 ... 0.110 cm ⁻¹ 0.250 ... 25.000 cm ⁻¹
盐度	0.0 ... 70.0 (依据IOT)	0.0 ... 70.0 (依据IOT)	0.0 ... 70.0 (依据IOT)
TDS	—	0 ... 1999 mg/l, 0 ... 199.9 g/l	0 ... 1999 mg/l, 0 ... 199.9 g/l
温度	-5.0 ... 105.0 °C ± 0.1 °C	-5.0 ... 105.0 °C ± 0.1 °C	-5.0 ... 105.0 °C ± 0.1 °C
自动读数	自动	自动/手动选择	自动/手动选择
参考温度	20 °C/25 °C	20 °C/25 °C	20 °C/25 °C
温度补偿	nLF (非线性补偿)	none, nIF, 0,000 ... 10,00 %/K	none, nIF, 0,000 ... 10,00 %/K
校正记录	记录最后一次校正	记录最后一次校正	记录最后5次校正
显示	7段LCD显示	7段LCD图形显示, 有背光	7段LCD图形显示, 有背光
数据存贮	---	手动200组	手动200组, 自动5000组
数据记录方式	---	手动	手动/时间驱动
界面	---	---	USB界面
电源	4×1.5V碱性电池.或4个1.2V充电电池	4×1.5V碱性电池.或4个1.2V充电电池	4×1.5V碱性电池.或4个1.2V充电电池
连续操作时间	高到2500小时	高达1000小时 (背光时150小时)	高达1000小时 (背光时150小时)

独特的、不会犯错误的: IDS 智能数字传感器

- 安全数字信号传输, 即使很长的电缆也没有干扰
- 理想的GLP和AQA, 每一个传感器包含它自己的系列号, 多达10组校正记录和特性数据, 消除误差和不必要的校正
- 防水快速接头, 传感器和仪表连接非常快速、参数测量更容易
- IDS pH传感器具有QSC和CMC功能, 保证测量准确、可靠
- IDS电导率测量: 2种传感器涵盖了所有的应用, 从纯水到高电导率溶液
- IDS溶解氧传感器:

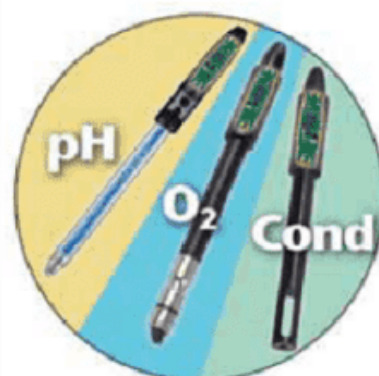

pH电极		
IDS传感器	普通传感器	电缆长度
SenTix® 940	SenTix® 41/42	1.5 m
SenTix® 940-3	SenTix® 41/42 -3	3 m
SensoLyt® 900-6	—	6 m (IP68)
SensoLyt® 900-25	—	25 m (IP68)
SenTix® 950	SenTix® 51/52	1.5 m
SenTix® 980	SenTix® 81/82	1.5 m
SenTix® ORP 900	SenTix® ORP	1.5 m

电导率电极 (IP68)		
IDS传感器	普通传感器	电缆长度
TetraCon® 925	TetraCon® 325	1.5 m
TetraCon® 925-3	TetraCon® 325-3	3 m
TetraCon® 925-6	TetraCon® 325-6	6 m
TetraCon® 925-25	—	25 m
LR 925/01	LR 325/01	1.5 m

新型荧光法溶解氧传感器FDO 925

- 特别快速(T99 < 60s)和精确的荧光法D.O.传感器 - 适合实验室和应急应用
- 内置数据芯片, 工厂校正的荧光帽
- 绿光技术, 传感器寿命长
- 细长设计, 适合BOD瓶测量
- 不受H2S干扰
- 45度斜角设计不受气泡影响

荧光溶解氧传感器 (IP68)	
IDS传感器	电缆长度
FDO 925	1.5 m
FDO 925-3	3 m
FDO 925-6	6 m
FDO 925-25	25 m



pH/ORP 电极

质量更优，使用更舒适，测试更精确！

- 低阻抗玻璃薄膜.保证了即使在低温条件下也能实现快速反应.稳定的测试
- 参比电极液Ag+含量低.白金隔膜对温度不敏感.避免了Ag+沉积引起的干扰
- SenTix电极非常牢固耐用.可防震
- 液态电解液使流速恒定.在温度变化时也不会堵塞隔膜
- 可选DIN或BNC接头



pH 电极(胶状电解液)

SenTix 20/21/21-3/22/41/41-3/42



优质 pH 电极(液态)

SenTix 60/61/62/81/82



纯水 pH 电极

SenTix HW



ORP 电极

SenTix ORP

技术参数

SenTix pH电极

型 号	SenTix 20	SenTix 41	SenTix 81	SenTix HW
货 号	103630	103635	103642	103 650
量 程	0-14 pH	0-14 pH	0-14 pH	0-14 pH
温度范围	0—80℃	0—80℃	0—100℃	0—60℃
参比填充液	胶状	胶状	3M KCl Ag ⁺ Free	3M KCl Ag ⁺ Free
内缓冲液	pH=7.0±0.25	pH=7.0±0.25	pH=7.0±0.25	pH=7.0±0.25
玻 璃 头	圆头	圆头	锥头	圆头
薄膜阻抗	300MΩ at 25℃	300MΩ at 25℃	100MΩ at 25℃	600MΩ at 25℃
隔 膜	纤维	纤维	白金	圆形
电极材质	Noryl	Noryl	玻璃	玻璃
电极长度	120±1mm	120±1mm	120±1mm	170±1mm
电极直径	12 mm±0.5	12 mm±0.5	12 mm±0.5	12/5 mm±0.5
电 极 线	不带电极线, 需外接 AS/DIN、AS/DIN-3、AS/BNC	长 1 米	长 1 米	不带, 外接 AS/DIN、AS/DIN-3、AS/BNC
接 头	DIN 或 BNC 可选	DIN.banana	DIN.banana	DIN 或 BNC 可选
温度探头	-	内置 NTC(30KΩ)	内置 NTC(30KΩ)	无

SenTix ORP电极

型 号	SenTix ORP	SenTix Ag	SenTix Au	SenTix PtR
货 号	103648	103664	103665	103666
工作温度	0-100℃	-5 -100℃	-5 -100℃	-5 -100℃
参比电解液	3M KCl	ELY/ORP/Ag	3M KCl	胶质
传 感 器	白金	银	金	白金
传感器形状	4mm圆形	圆柱形	圆柱形	裂环
电极体材质	玻璃	玻璃	玻璃	玻璃
电极体长度	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
电极体直径	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
接 头	S7接头, 需另配电缆线, 型号AS DIN, AS DIN-3或AS BNC			

便携式 pH/ORP 测量仪

订货信息 (部分)

成套供应		
型号	仪器说明	货号
pH 3110	pH 3110 主机、使用手册、光盘、4AA 碱性电池	2AA110
pH 3110 SET1	主机、 SenTix® 21 电极、携带箱、4/7 校准液、电极支架、烧杯、使用手册、光盘、4AA 碱性电池	2AA111
pH 3110 SET2	主机、 SenTix® 41 电极、携带箱、4/7 校准液、电极支架、烧杯、使用手册、光盘、4AA 碱性电池	2AA112
pH 3110 SET3	用于饮用水、主机、 SenTix® 81 电极、携带箱、4/7 校准液、电极支架、烧杯、使用手册、光盘、4AA 碱性电池、流通池 MG/PH	2AA113
pH 3210	pH 3210 主机、使用手册、光盘、4AA 碱性电池	2AA210
pH 3210 SET2	主机、 SenTix® 41 电极、携带箱、4/7 校准液、电极支架、烧杯、使用手册、光盘、4AA 碱性电池	2AA212
pH 3210 SET3	用于饮用水、主机、 SenTix® 81 电极、携带箱、4/7 校准液、电极支架、烧杯、使用手册、光盘、4AA 碱性电池、流通池 MG/PH	2AA213
pH 3210 SET4	主机、 SenTix® 51 电极、携带箱、4/7 校准液、电极支架、烧杯、使用手册、光盘、4AA 碱性电池	2AA214
pH 3310	pH 3310 主机、使用手册、光盘、4AA 碱性电池、USB 电缆	2AA310
pH 3310 SET2	主机、 SenTix® 41 电极、携带箱、4/7 校准液、电极支架、烧杯、使用手册、USB 通信软件光盘、USB 电缆、4AA 碱性电池	2AA312
pH 3310 SET3	用于饮用水、主机、 SenTix® 81 电极、携带箱、4/7 校准液、电极支架、烧杯、使用手册、USB 通信软件光盘、USB 电缆、4AA 碱性电池、流通池 MG/PH	2AA313
pH 3310 SET4	主机、 SenTix® 51 电极、携带箱、4/7 校准液、电极支架、烧杯、使用手册、USB 通信软件光盘、USB 电缆、4AA 碱性电池	2AA314
电极		
SenTix 21	凝胶电解液, 环氧树脂外壳 pH 复合电极, 电极线长 1 米、防水 DIN 插头	103 631
SenTix 21-3	与 SenTix 21 同, 电极线长 3 米、DIN 插头	103 632
SenTix 41-3	凝胶电解液, 环氧树脂外壳 pH 复合电极, 内置温度电极, 3 米电缆	103 636
SenTix 51	液态电解液, 环氧树脂外壳 pH 复合电极, 内置温度电极, 可更换隔膜, 1 米电缆	103 651
SenTix 61	液态电解液, 玻璃 pH 复合电极, 长度 120mm, 1 米电缆, 防水 DIN 插头	103 640
SenTix 81	液态电解液, 玻璃 pH 复合电极, 内置温度电极, 长度 120mm, 1 米电缆	103 642
SenTix HW	精确 pH 复合电极, 圆形隔膜, 适合低离子强度介质和 S7 插头, 长度 165mm, 无电缆	103 650
SenTix ORP	ORP 复合电极 (铂金-银/氯化银), 液态电解液 (3 mol/l KCl), 长度 120mm, S7 插头	103 648
SenTix Au	ORP 复合电极 (黄金-银/氯化银), 液态电解液 (3 mol/l KCl), 长度 120mm, S7 插头	103 665
附件		
AS/DIN	AS7 连接电缆带 DIN 插头, 1 米电缆	108 110
AS/DIN	AS7 连接电缆带 DIN 插头, 3 米电缆	108 112
TFK325	温度测量传感器, 用于水溶液, 带防水插头	102 280
TPL4	PH 缓冲溶液、1 瓶 250ml, PH=4.01	108 800
TPL7	PH 缓冲溶液、1 瓶 250ml, PH=7.00	108 802
RH28	ORP 缓冲溶液、1 瓶 250ml, PH=7.00, U=427mV	109 740
STH650	电极支架、可折迭式电极支架	109 809

电导率电极

TetraCon®

WTW生产的电导率测量仪及电导率电极居于世界领先水平，已经有50多年的制造经验。专利TetraCon® 四极测试技术与二极式相比有以下无可比拟的优点：

- 电极精心设计，准确性，线性度非常高
- 测试范围非常广
- 石墨电极质优，耐磨损，电极常数非常稳定
- 内置温度探头
- 浸入深度最小
- 电极受污染不影响测试精度，具自动补偿电极表面接触电阻变化的功能
- 导线阻抗不影响测试精度
- 样品流动自由，具有代表性
- 不受极化的影响
- 电极材质为环氧树脂，不易碎

此外，我们还有特殊应用的电极，如测试超纯水，锅炉水，去离子水等供选

电导率电极					
应用	标准	特殊	超纯水	痕量级	流通式
型号	TetraCon®325	TetraCon®325S	LR 325/01	LR 325/001	TetraCon® DU/T
外形					
电极材质	石墨	石墨	V4A不锈钢	V4A不锈钢	石墨
流通槽	—	—	玻璃	V4A不锈钢	—
外壳材质	环氧树脂	环氧树脂	V4A不锈钢	V4A不锈钢	环氧树脂
长度	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	155 mm
电极常数	$K = 0.475 \text{ cm}^{-1}$	$K = 0.491 \text{ cm}^{-1}$	$K = 0.1 \text{ cm}^{-1}$	$K = 0.01 \text{ cm}^{-1}$	$K = 0.778 \text{ cm}^{-1}$
直径	15.3 mm	15.3 mm	12 mm	20 mm	—
电缆长度	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1 m
测量范围	1µS/cm - 2S/cm*	1µS/cm - 2S/cm*	0.001 - 200µS/cm	0.0001 - 30µS/cm	1µS/cm - 2S/cm*
温度范围	0 ... 100 °C	0 ... 100 °C	0 ... 100 °C	0 ... 100 °C	0 ... 60 °C
填充体积	—	—	17 ml (无传感器)	10 ml (无传感器)	7 ml
最小/最大浸入深度	36/120 mm	40/120 mm	30/120 mm	40/120 mm	—
应用	地表水、地下水、实验室测量、食品工业等	化妆品/洗涤剂	超纯水、半导体、实验室测量等	超纯水、半导体、实验室测量等	化学/化工

便携式电导率测量仪

订货信息 (部分)

成套供应		
型号	说明	货号
Cond 3110	主机	2CA100
Cond 3110SET 1	主机、TetraCon 325 电极、携带箱、1413 μ S/cm 标准液、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2CA101
Cond 3110 SET 2	主机、TetraCon 325-3 电极/3 米线、携带箱、1413 μ S/cm 标准液、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2CA102
Cond 3210	主机	2CA200
Cond 3210 SET 1	主机、TetraCon 325 电极、携带箱、1413 μ S/cm 标准液、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2CA201
Cond 3210 SET2	主机、TetraCon 325-3 电极/3 米线、携带箱、1413 μ S/cm 标准液、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2CA202
Cond 3210 SET4	主机、LR 325/01 电极、携带箱、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2CA204
Cond 3310	主机	2CA300
Cond 3310 SET 1	主机、TetraCon 325 电极、携带箱、1413 μ S/cm 标准液、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘、USB 软件和电缆	2CA301
Cond 3310 SET 2	主机、TetraCon 325-3 电极/3 米线、携带箱、1413 μ S/cm 标准液、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘、USB 软件和电缆	2CA302
Cond 3310 SET 4	主机、LR 325/01 电极、携带箱、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘、USB 软件和电缆	2CA304
电导率电极		
TetraCon 325	标准 4 极式石墨电极, 测量范围: 1 μ S/cm...2S/cm, 1.5 米电缆	301960
TetraCon 325-3	标准 4 极式石墨电极, 测量范围: 1 μ S/cm...2S/cm, 3 米电缆	301970
TetraCon 325-6	标准 4 极式石墨电极, 测量范围: 1 μ S/cm...2S/cm, 6 米电缆	301971
TetraCon 325-10	标准 4 极式石墨电极, 测量范围: 1 μ S/cm...2S/cm, 10 米电缆	301972
LR325/01	不锈钢超纯水电极, 测量范围: 0.001 μ S/cm...300 μ S/cm	301961
LR325/001	痕量电导电极, 测量范围: 0.0001 μ S/cm...30 μ S/cm	301962
TetraCon 325 S	4 极式石墨电极, 特殊应用, 测量范围: 1 μ S/cm...2S/cm, 1.5 米电缆	301602
TetraCon DU/T	流通型电导电极, 测量范围: 1 μ S/cm...2S/cm	301252
KKDU 325	1 米连接电缆, 用于 TetraCon DU/T 电极	301963
附 件		
USP KIT 1	符合药典的电导率测量工具包, 测试设备包括: 6R/SET/Lab1、LR 325/01 超纯水电导率电极、D01/T 流通槽、NIST 低电导率标准液 5 μ S/cm (精度 $\pm$ 2%)	300569
USP KIT 2	符合药典的电导率测量工具包, 测试设备包括: 6R/SET/Lab1、LR 325/01超纯水电导率电极、不锈钢流通槽、NIST低电导率标准液5 μ S/cm (精度 $\pm$ 2%)	300568
KS 100 μ S	300ml 校正标准溶液 (100 μ S/cm, $\pm$ 3%)	300578
KS 5 μ S	300ml 校正标准溶液 (5 μ S/cm, $\pm$ 2%)	300580
6R/SET/LAB 1	电导率仪表测试设备, 符合 ISO9000	302870

Galvanic 溶氧电极

特性:

- Galvanic传感器: 无需预热, 立即测量
- 装配保护罩, 适合恶劣条件使用
- 校正简单, 随机配套校正套

DurOx 325

仅用于便携式测量仪

Oxi 3000i/Oxi 1970i 和 Multi 350i

覆膜式galvanic溶解氧传感器

- 温度补偿
- 长工作寿命 – 一次填充电解液可用6个月
- 低流速要求
- 防水传感器 (IP 68--2巴)
- 标准配备OxiCal-D贮存校正套



StirrOx G

适合Oxi 730、Oxi 740和Oxi 1970i

自搅拌DO/BOD传感器, 同时搅拌和测量

- 单手操作, 便于批次快速测量
- 流速恒定, 重复性高
- 特别低的氧气消耗量, 只有0.008ug·h⁻¹·(mg/l)⁻¹
- 标准配备OxiCal -ST贮存校正套
- 温度补偿
- 薄膜泄露监测



Cellox 325

覆膜式galvanic溶解氧传感器

- 温度补偿
- 薄膜可使用6个月
- 高信号分辨率
- 快速反应
- 防水传感器 (IP 68--2巴)
- 标准配备贮存校正套OxiCal -SL
- 薄膜泄露监测



传感器应用范围

• WTW推荐使用 ○ 有条件限制使用 – 不建议

应用范围	DurOx®	Cellox® 325	StirrOx® G
BOD测量	–	○	•
水厂养殖	•	○	–
地表水	○	•	–
地下水	–	○	–
控制测量	•	•	○
实验室测量	–	•	○
石化	○	•	–
生物技术	○	•	–
污水处理: 曝气池	•	○	–
配套仪表:	Oxi 3000i, Multi 350i	所有	inoLab®, 1970i
2年质保, 适合所有的DO传感器的质量问题			

便携式溶解氧测量仪

订货信息（部分）

成套供应		
型号	仪器说明	货号
Oxi 3205	主机, 包含电池、使用手册、光盘	2BA100
Oxi 3205 SET 1	主机、CellOx®325 电极、携带箱、清洗液、电解液、溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2BA101
Oxi 3205 SET2	主机、CellOx®325-3 电极/3 米线、携带箱、清洗液、电解液、溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2BA102
Oxi 3205 SET 3	主机、DurOx®325-3 电极/3 米线、携带箱、清洗液、电解液、溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2BA103
Oxi 3210	主机, 包含电池、使用手册、光盘	2BA200
Oxi 3210 SET 1	Oxi 3210 SET1、主机、CellOx®325 电极、携带箱、清洗液、电解液、溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2BA201
Ox 3210 SET2	Oxi 3210 SET2、主机、CellOx®325-3 电极/3 米线、携带箱、清洗液、电解液、溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2BA202
Oxi 3210 SET 3	Oxi 3210 SET3、主机、DurOx®325-3 电极/3 米线、携带箱、清洗液、电解液、溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘	2BA203
Oxi 3310	主机, 包含电池、使用手册、光盘	2BA300
Oxi 3310 SET 1	Oxi 3310 SET1、主机、CellOx®325 电极、携带箱、清洗液、电解液、3 个溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘、USB 软件和电缆	2BA301
Ox 3310 SET2	Oxi 3310 SET2、主机、CellOx®325-3 电极/3 米线、携带箱、清洗液、电解液、3 个溶氧膜、电极支架、烧杯、4AA1.5V 电池、使用手册、光盘、USB 软件和电缆	2BA302
溶解氧电极		
DurOx 325-3	Galvanic DO 传感器带 OxiCal-D 校正套, 电缆长 3 米	201570
DurOx 325-6	Galvanic DO 传感器带 OxiCal-D 校正套, 电缆长 6 米	201571
CellOx 325	Galvanic DO 传感器带 OxiCal-SL 校正套, 电缆长 1.5 米	201533
CellOx 325-3	Galvanic DO 传感器带 OxiCal-SL 校正套, 电缆长 3 米	201545
CellOx 325-6	Galvanic DO 传感器带 OxiCal-SL 校正套, 电缆长 6 米	201546
CellOx 325-10	Galvanic DO 传感器带 OxiCal-SL 校正套, 电缆长 10 米	201547
StirrOx -G	自搅拌 BOD 传感器带 OxiCal-ST 校正套, 电缆长 1.5 米	201425
附件		
ZBK-D	DurOx 325 传感器备品和维护耗品	201578
ZBK 325	CellOx 325 传感器备品和维护耗品	202706
ZBK-ST	StirrOx -G 传感器备品和维护耗品	202710
WP3-D	DurOx 325 传感器 3 个更换盖式薄膜	202740
WP 90/3	CellOx 325 传感器 3 个更换盖式薄膜	202725
WP3-ST	StirrOx -G 传感器 3 个更换盖式薄膜	202738
RL/G	50ml 清洗溶液	205204
ELY/G	50ml 电解溶液	205217